


POWERED BY

ASTROPET

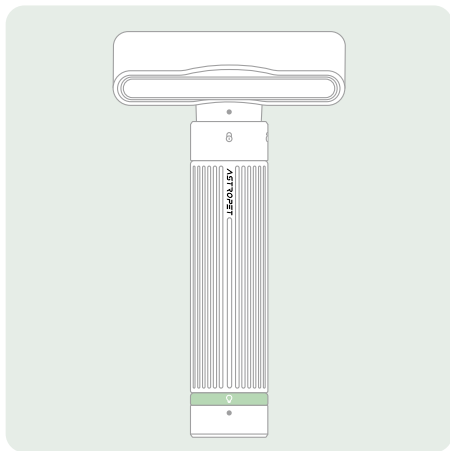


Haustierbürste mit UV Lampe

Pet Brush with UV Lamp

DE Benutzerhandbuch

EN User Manual


1 Produktinformation

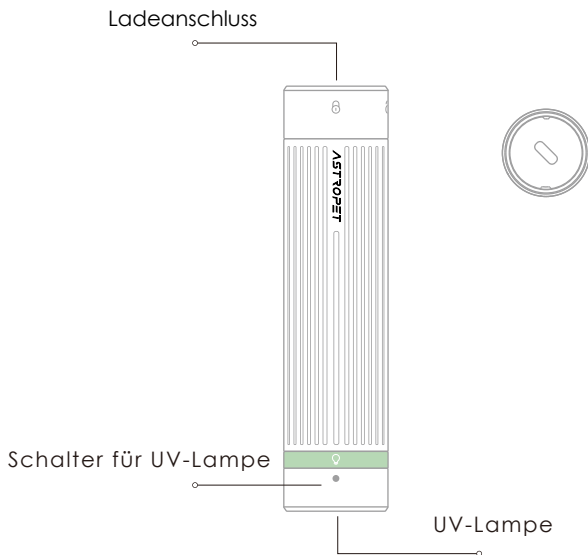


② Lieferumfang

Hinweis:


Nachdem Sie das Produkt aus der Verpackung entnommen haben, überprüfen Sie bitte sorgfältig, ob es sich in einwandfreiem Zustand befindet und vergleichen Sie die mitgelieferten Zubehörteile mit der Bedienungsanleitung. Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Produktaktualisierungen und -erweiterungen Anpassungen oder Änderungen am Zubehör vorgenommen werden können. Die tatsächlichen Gegenstände sollten als abschließende Referenz betrachtet werden.

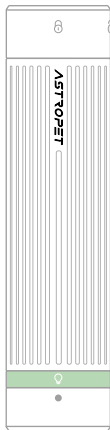

Griff

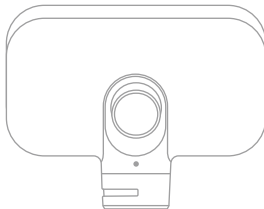

Nadelstreifenkamm

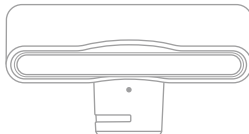


Entfilzungskamm

3 Gebrauchsanweisung

Kammkopf-Austausch

Entfernen Sie den Kammkopf, indem Sie ihn gemäß dem Muster des Griffs  nach oben drehen. Zum Einsetzen die Laschen am Kammkopf mit dem Muster  ausrichten und einsetzen, drehen, bis  die Installation abgeschlossen ist

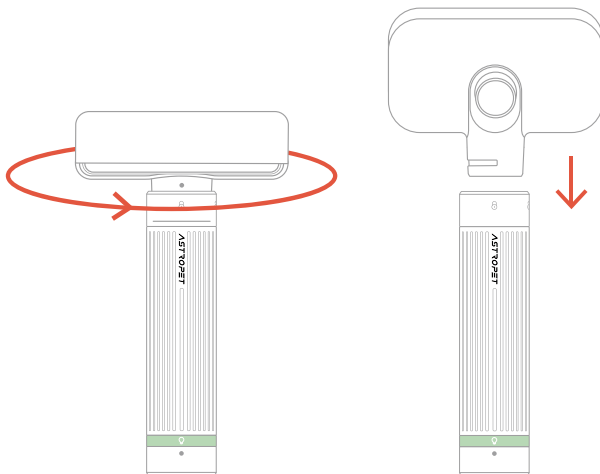

UV-Lampen (Wood-Lampe) Untersuchung

Um die UV-Lampe zu aktivieren, drehen Sie den Griff am hinteren Ende entsprechend dem Diagramm. Stellen Sie während der Verwendung sicher, dass die Untersuchung in einem mäßig gedimmten Raum stattfindet.

Richten Sie das Licht der Lampe auf die vermutlich betroffene Stelle der Tierhaut. Beleuchten Sie den betroffenen Bereich in einem abgedunkelten Raum.

Bei 50 - 60% der *Microsporum canis*-Infektionen zeigt sich eine grüne Fluoreszenz, die entlang der Haarschäfte verläuft. Beobachten Sie die abgegebene Fluoreszenz, um das mögliche Vorhandensein und die Schwere der Dermatophytose in der Tierhaut zu beurteilen.


Wichtiger Hinweis

*Die Ergebnisse dieser Untersuchung sollten nur als Referenz dienen und können nicht als abschließend für die Diagnosestellung betrachtet werden. Für eine endgültige Diagnose besuchen Sie bitte eine Tierarztpraxis für eine professionelle Beratung.

*Medikamente, Seifen und Bakterien (*Pseudomonas* sp.) oder gelegentliche einzelne Schuppen können ebenfalls fluoreszieren, sie sollten jedoch nicht mit den Haarschäften in Verbindung gebracht werden. Vorsicht: Fehlende fluoreszierende Bereiche schließen eine Dermatophytose nicht aus.

Aufladen

Entfernen Sie den Kammkopf wie oben beschrieben und schließen Sie das Typ-C-Stromkabel zum Laden an. Ein rotes Licht zeigt an, dass der Ladevorgang läuft, und ein grünes Licht zeigt an, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.

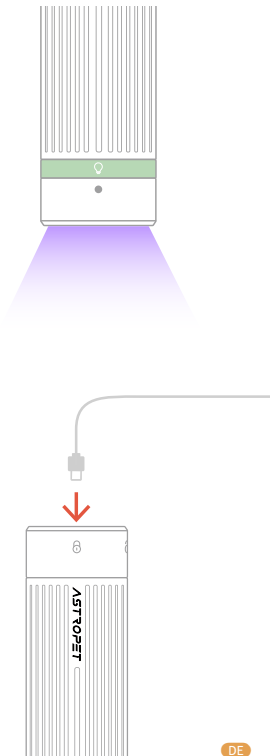

4 Produktspezifikationen

Produktname: Haustierbürste mit UV-Lampe

Hauptmaterial: ABS, TPR, Edelstahl

Lieferumfang: Griff x 1, Kammkopf x 2

Batteriekapazität: 700mAh

Nennspannung: 5V 1A

5 Garantiekarte

Liebe Kunden, vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Garantiebedingungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden:


- 1 Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab dem Kaufdatum (auf der Grundlage gültiger Kaufbelege). Wir bieten innerhalb dieser Zeit kostenlose Wartung für jegliche Qualitätsprobleme an.
- 2 Die folgenden Bedingungen sind von der Garantie ausgeschlossen:
 - Jegliche Fehlfunktionen oder Defekte, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden;
 - Jeglicher Fehler oder Defekt, der durch unsachgemäße Installation, Missbrauch, nicht autorisierte Wartung, höhere Gewalt oder andere externe Faktoren verursacht wurde;
 - Jeglicher Fehler oder Defekt, der durch die Verwendung von nicht originalen Teilen oder Zubehör verursacht wurde;
 - Das Produkt hat die Garantiezeit überschritten;
 - Andere Ausfälle oder Schäden, die nicht auf Produktgestaltung, Technologie, Fertigungsprozess oder Qualitätsprobleme zurückzuführen sind;
 - Normales Verblässen, Abnutzung oder Verbrauch während der Nutzung des Produkts;
 - Nicht-Vorlage eines gültigen Kaufbelegs.
- 3 Wenden Sie sich bitte innerhalb einer angemessenen Frist an den Kundendienst, um die Garantieansprüche zu bestätigen.
- 4 Wenn das zurückgesandte Produkt nicht den gültigen Garantiebedingungen entspricht, werden wir Ihnen die entsprechenden Wartungskosten in Rechnung stellen.
- 5 Bitte füllen Sie das folgende Reklamations-Formular für unseren Kundendienst aus und senden Sie uns dieses zusammen mit dem zurückzugebenden Produkt zu.

Feedback

Kundenname:
Telefonnummer:
E-Mail-Adresse:
Adresse:

Produktmodell:
Kaufdatum:
Kaufort:
Fehlerbeschreibung:


1 Product Information

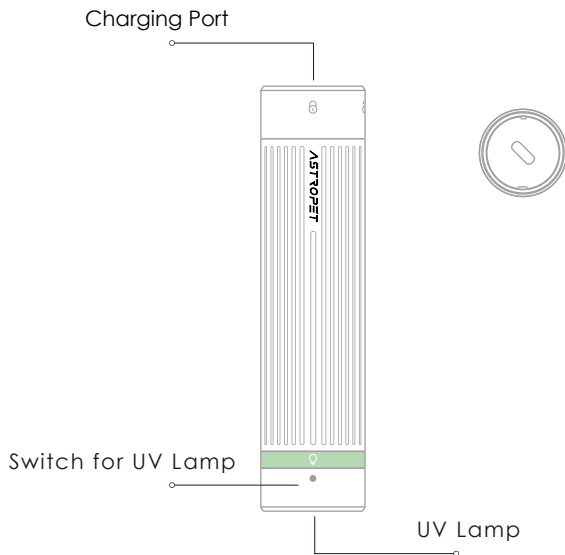


② Packing List

Notice:


After removing it from the package, please ensure that the product is in good condition and compare the accessories with the instruction manual. Please note that due to product updates and iterations, the accessories may have undergone adjustments or changes. The actual objects should be considered as the final reference.

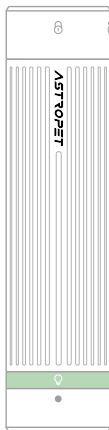

Handle

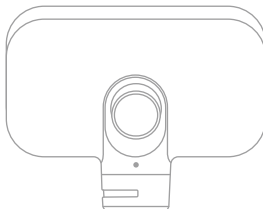

Pinstripe Comb

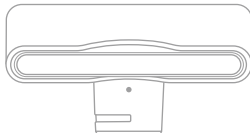


Hair Removal Comb

3 Instructions

Comb head replacement

Remove the comb head by rotating it upward as indicated by the handle pattern ①.

To install, align the tabs on the comb head with the pattern ① and insert, rotating until ② installation is complete.

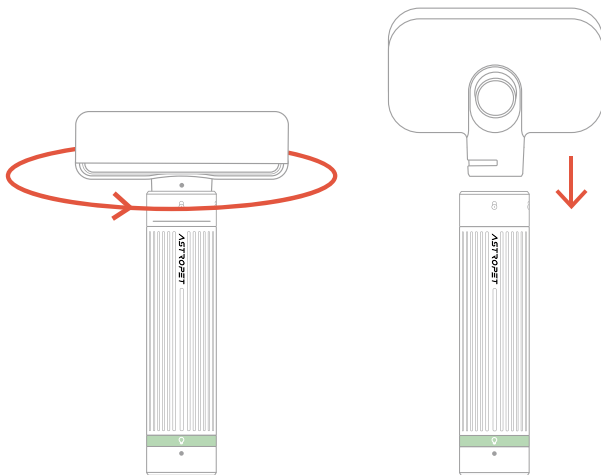

UV Lamp (Wood's lamp) Examination

To activate the UV lamp, rotate the handle at the rear as indicated by the diagram. During use, ensure the examination takes place in a moderately dimly lit room. Direct the lamp's light onto the suspected affected area of the pet's skin. Illuminate the affected area in a darkened room.

In 50 - 60% of *Microsporum canis* infections there will be greenish fluorescence which runs along the hair shafts. Observe the fluorescence emitted to assess the potential presence and severity of dermatophytosis in the pet's skin.


Important Notice:

*The results obtained from this examination should serve as references only and cannot be considered conclusive for making a diagnosis. For a definitive diagnosis, please visit a veterinary clinic for a professional consultation.

*Drugs, soaps and bacteria (*Pseudomonas* sp.) or occasional individual scales can fluoresce as well, but they should not be associated with the hair shafts. Be careful: A lack of fluorescent areas does not rule out dermatophytosis.

Charging

Remove the comb head as described above and connect the type-c power cord for charging, a red light indicates charging is in progress and a green light indicates charging is complete.

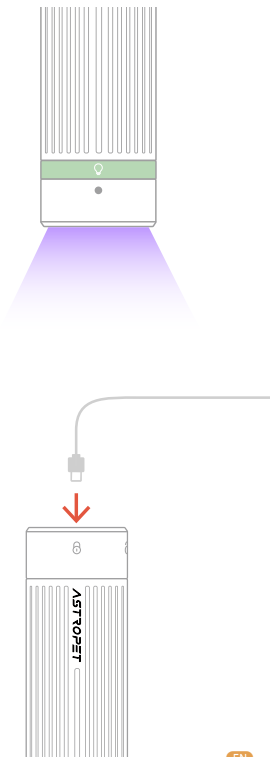

4 Product Specifications

Product name: Pet brush with UV lamp
Main material: ABS, TPR, Stainless steel
Packing list: Handle x 1, Comb head x 2

Battery capacity: 700mAh
Input rating: 5V1A

5 Warranty Card

Dear customers, thank you for purchasing this product, please read the following warranty terms carefully before using this product:

- ① The warranty period is two years, starting from the date of purchase (based on valid purchase records). We provide free maintenance for any quality problem within this duration.
- ② The following conditions are not covered by the warranty:
 - Any malfunction or defect caused by improper conditions of use of environment;
 - Any fault or defect caused by improper installation, misuse, unauthorized maintenance, force majeure events, or other external reasons;
 - Any fault or defect caused by use of non-original fittings or accessories;
 - The product has exceeded the warranty period;
 - Other failures or damages caused by none of product design, technology, manufacturing process or quality problems;
 - Normal fading, wear and tear or consumption during the use of the product;
 - Not able to provide valid purchase certificate.
- ③ Please contact Customer Service within a proper time to confirm warranty service situation.
- ④ If the returned product does not meet the valid warranty terms, we will charge you for the corresponding maintenance costs.
- ⑤ Please fill in the after-sales information feedback form and send it together with the returned product.

Feedback

Customer Name:
Your Phone Number:
Your E-Mail:
Your Address:

Product Model:
Date Of Purchase:
Where You Purchase:
Fault Feedback: